

Des fonctions avancées


Souffle d’air adapté aux patients

- Design doux de l'embout  
Le design doux de la buse réduit la perception de pression physique par le patient.
- Jet d'air plus doux et silencieux  
Le design mécanique du NT-1p réduit le bruit et l'intensité de l'air, ce qui permet d'obtenir un souffle d'air doux.
- Capteur de contact de l'embout  
Un message apparaît pour alerter les utilisateurs s'il y a un contact entre la paupière/cornée et la buse d'air durant la mesure. L'unité de mesure se recule automatiquement des yeux du patient et la mesure s'arrête pour la sécurité du patient.



Pachymétrie\*

\* NT-1p uniquement

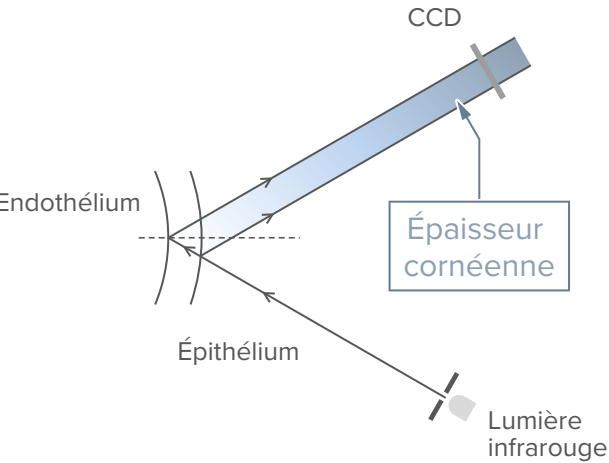

La pachymétrie sans contact permet de mesurer l'épaisseur cornéenne.

Le principe de la réflexion spéculaire pour la pachymétrie permet un design plus compact dans le NT-1p.

Écran tactile couleur LCD 7 pouces, inclinable et pivotable

Imprimante thermique intégrée

Caractéristiques techniques\* NT-1e / NT-1 / NT-1p

|                                                    | NT-1e                                                                                                                                  | NT-1                                        | NT-1p                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tonomètre sans contact</b>                      |                                                                                                                                        |                                             |                                                |
| Plage de mesures                                   | 1 à 60 mmHg                                                                                                                            |                                             |                                                |
| Paramètres des plages de mesure                    | APC 40 / APC 60 (APC= "Automatic Puff Control") / 40 / 60                                                                              |                                             |                                                |
| Distance de travail                                | 11 mm                                                                                                                                  |                                             |                                                |
| Point de fixation                                  | Point de fixation interne                                                                                                              |                                             |                                                |
| <b>Pachymètre sans contact</b>                     | –                                                                                                                                      | –                                           | Oui                                            |
| Plage de mesures                                   | –                                                                                                                                      | –                                           | 300 à 800 µm                                   |
| Source lumineuse                                   | –                                                                                                                                      | –                                           | Lumière infrarouge                             |
| Compensation de la PIO selon l'épaisseur de cornée | –                                                                                                                                      | Entrée manuelle de l'épaisseur de la cornée | Mesure automatique de l'épaisseur de la cornée |
| Auto tracking                                      | 3D (XYZ)                                                                                                                               |                                             |                                                |
| Déclenchement de la mesure                         | Automatique                                                                                                                            |                                             |                                                |
| Détection des yeux                                 | –                                                                                                                                      | Automatique                                 |                                                |
| Déplacement de l'appareil                          | –                                                                                                                                      | Automatique d'un œil à l'autre              |                                                |
| Instructions vocales                               | –                                                                                                                                      | Disponible                                  |                                                |
| Écran                                              | Tactile inclinable et pivotable, couleur LCD 7 pouces                                                                                  |                                             |                                                |
| Imprimante                                         | Thermique intégrée avec découpage automatique et chargement facile du rouleau                                                          |                                             |                                                |
| Connectiques                                       | RS-232C: 1 port / USB : 2 ports : LAN : 1 port, Wireless LAN® (WLAN)                                                                   |                                             |                                                |
| Alimentation                                       | CA 100 à 240V, 50/60 Hz                                                                                                                |                                             |                                                |
| Consommation                                       | 100 VA                                                                                                                                 |                                             |                                                |
| Dimensions et masse                                | 305 (L) x 492 (P) x 493 (H) mm / 20 kg                                                                                                 |                                             |                                                |
| Accessoires standards                              | Rouleaux de papier d'impression, papier mentonnière, picotes de fixation pour mentonnière, cordon d'alimentation, housse de protection |                                             |                                                |
| Accessoires en option                              | Câble RS-232C, câble RJ45, manette de contrôle (avec ou sans fil)                                                                      |                                             |                                                |

(†) Seulement applicable sur les modèles qui incluent le module wireless LAN.  
\*Les caractéristiques techniques et le design des appareils sont susceptibles d'être modifiés pour être améliorés.

Indications : dispositif médical de Classe IIa/ Certifié par le DEKRA Certification B.V. / CE0344.  
Le tonomètre NT-1 est conçu afin d'être utilisé pour la mesure de la pression intraoculaire. Le tonomètre NT-1p est conçu afin d'être utilisé pour la mesure de la pression intraoculaire et de l'épaisseur cornéenne.  
Informations de bon usage : dispositif médical destiné aux professionnels de santé. Les précautions de sécurité et les procédures d'utilisation doivent être parfaitement assimilées avant l'utilisation de ce dispositif. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.  
Matériel fabriqué par NIDEK CO.,LTD. Date de dernière mise à jour : décembre 2022.

Eye & Health Care  
**NIDEK CO., LTD.**

NIDEK SA  
Siège social  
Ecoparc  
9, rue Benjamin Franklin  
94370 Sucy-en-Brie - France  
Tél. : +33 (0)1 49 80 97 97  
Mail : site@nidek.fr  
Web : www.nidek.fr



Tonomètres / Tonomètre-pachymètre sans contact

NT-1e / NT-1 / NT-1p



THE ART OF EYE CARE



# Conception innovante pour des mesures de tonométrie douces et confortables



Le NT-1p est un tonomètre-pachymètre sans contact dont la particularité est d'être entièrement automatisé, du début à la fin du processus de mesure. Il est le fruit de l'association du savoir-faire et de la connaissance technologique NIDEK. Le nouveau modèle NT-1p combine automatisation, facilité d'utilisation et des fonctionnalités ergonomiques pour un examen clinique optimal et confortable du patient.



# Grande liberté d'installation et flexibilité d'utilisation

Le modèle de tono-pachymétrie NT-1p entièrement automatisé possède un large écran inclinable et pivotable. Cet écran offre une grande souplesse d'installation car il permet de positionner l'appareil aisément dans n'importe quel emplacement (par exemple sur une unité de consultation, dans le coin d'une pièce, contre un mur, etc.), dans le but de gagner de la place et d'optimiser l'espace dans des configurations réduites.


Ce nouvel écran offre une large amplitude de mouvement et d'inclinaison. Cette caractéristique fonctionnelle et nouvelle apporte l'avantage d'adapter l'appareil aux situations ainsi qu'aux divers besoins des patients et de la clinique.



# Compensation de la PIO en fonction de l'épaisseur cornéenne\*

**NT-1p** : Les valeurs de la pression intra-oculaire (PIO) sont automatiquement calculées en compensant l'épaisseur de la cornée centrale du patient.

**NT-1** : la PIO peut être compensée en entrant manuellement les valeurs de l'épaisseur cornéenne centrale.

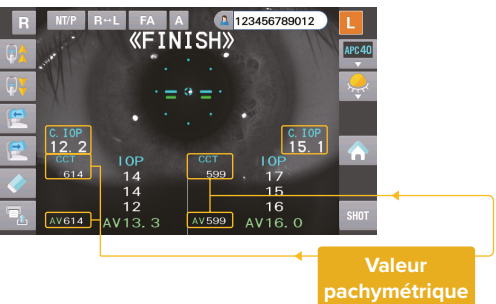

Les données de pachymétrie sont utilisées pour calculer les données de PIO corrigées.

## Le Joystick

Le joystick est présent sur la machine en complément des opérations possible par l'écran tactile de l'appareil.

Il permet à l'opérateur d'effectuer des réglages fins pour si besoin faciliter l'alignement, même sur des yeux avec une mauvaise fixation.

Le bouton à 4 directions de ce nouveau joystick permet de déplacer en douceur l'unité de mesure vers l'avant, l'arrière, la droite à la gauche.



\* NT-1p et NT-1 uniquement

# Automatisation complète de la prise de mesure

Dès que le visage est correctement positionné sur la mentonnière, une caméra grand-angle et des capteurs spécialement conçus par NIDEK détectent les yeux du patient et ajustent automatiquement la bonne position de la mentonnière. Le processus de mesure débute tout seul sans la moindre action sur l'écran de contrôle de la part de l'opérateur.



- 1 Détection automatique de la position des yeux (et réglage automatique de la position de la mentonnière si nécessaire).
- 2 Alignement et déclenchement de la mesure automatique sur le premier œil.
- 3 Déplacement automatique de l'appareil vers le deuxième œil.
- 4 Alignement et déclenchement de la mesure automatique sur le deuxième œil.

Guidage vocal tout au long du processus de mesure

## Tonométrie sans contact confortable pour le patient

Avec la technologie APC (« Automatic Puff Control ») la mesure s'effectue avec le maximum de douceur. La puissance du jet d'air s'ajuste automatiquement selon la PIO du patient pour optimiser le confort et réduire le bruit lors de la prise de mesure.

